


能動義手に使用されているコントロールケーブルシステム

プーリーユニット

近畿KP1-6

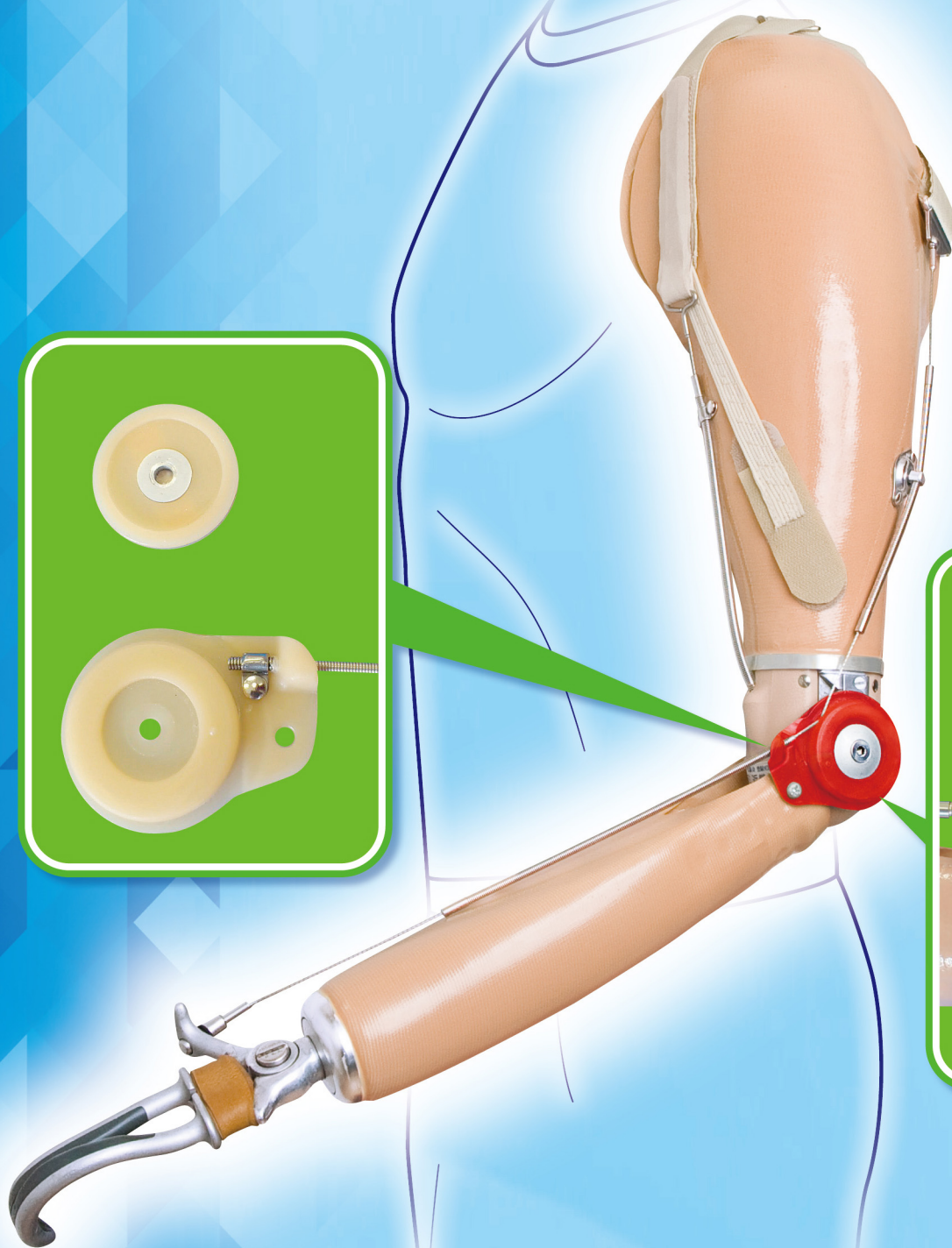

◆ 販売店

◆ 製造元

 **近畿義肢製作所**

(一社) 日本義肢協会登録・近畿146号


〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬990-1

TEL(078)974-2412 FAX(078)974-2436

<http://www.kinkigishi.co.jp/>


プーリーユニットの特長

従来の方式(リフトプーリー方式)

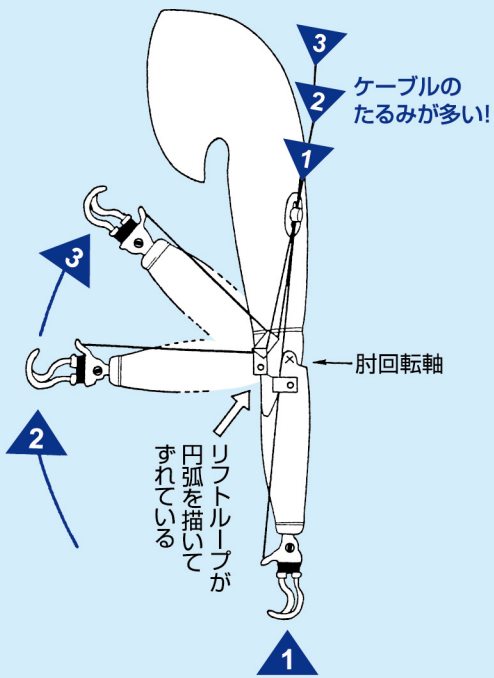


プーリーを使った方式 (肘プーリーユニット方式)

肘の屈曲時、常に肘の回転軸とケーブルの走行位置関係を一定に保ち、ケーブルロスを少なくする方法として、このプーリーユニットをつけることでその有効性が実証されています。

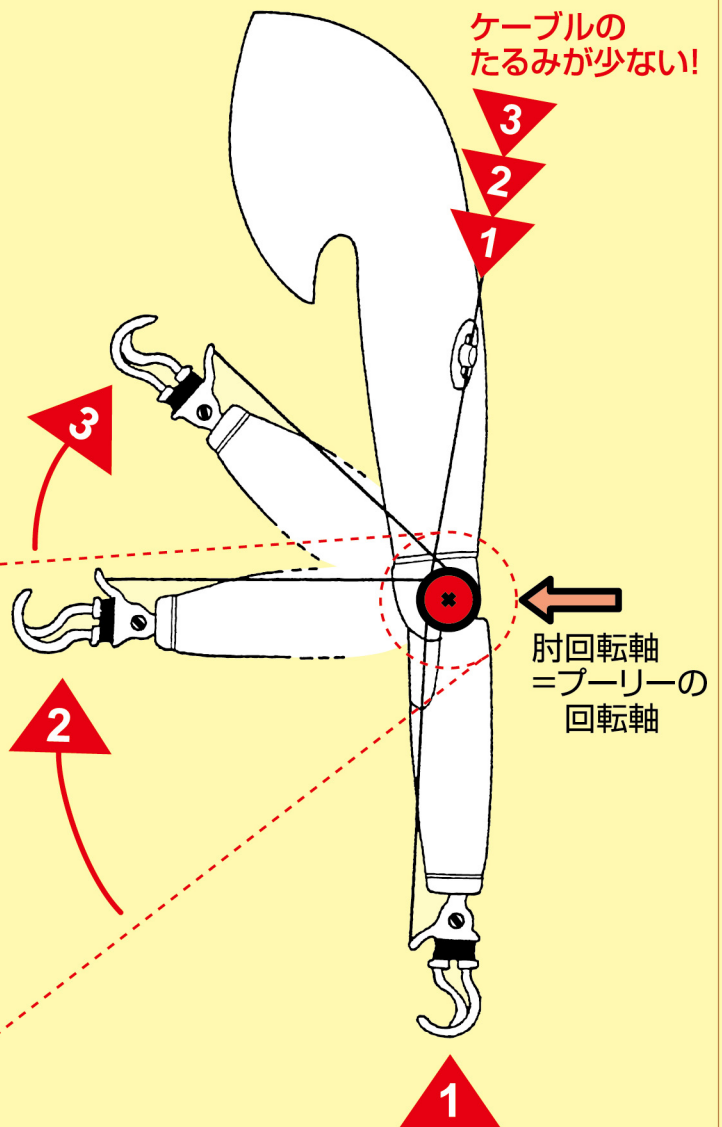

プーリーユニット分解図

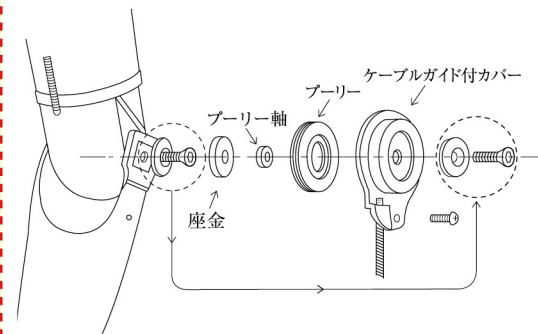

使用効果

- ユニットの使用により、肘継手の伸展位と屈曲位において伝達効率が一定である。
- 肘屈曲位でケーブルの遊びが3~4cm少なくなる。
- 最大屈曲位で手先具の開閉が容易である。